


PAMĀCĪBA

PRIMĀRO PARAUGU (UZTRIEPE NO MUTES GĻOTĀDAS) NOŅEMŠANAI

SVARĪGI!!!

- PIRMS PARAUGU NOŅEMŠANAS IZLASIET PAMĀCĪBU LĪDZ GALAM.
- NEVEICIET PARAUGA NOŅEMŠANU TŪLĪT PĒC ZOBU TĪRĪŠANAS, ĒŠANAS (ĪPAŠI ZĪDAIŅIEM) VAI SMĒKĒŠANAS (NOGAIDIET VISMAZ VIENU STUNDU).

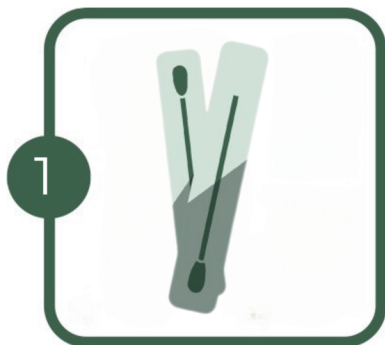


1
KATRAI TESTĀ IESAISTĪTAI PERSONAI NEPIECIEŠAMAS DIVAS BIRSTĪTES UN TO ORIGINĀLAIS INDIVIDUĀLAIS IEPAKOJUMS.



2 OBLIGĀTI AIZPILDIET TESTĒŠANAS PIEPRASĪJUMA VEIDLAPU UN NORĀDIET:

- VĀRDU VAI SEGVĀRDU VISĀM TESTĀ IESAISTĪTĀJĀM PERSONĀM;
- TESTĒJAMO RADNIECĪBAS VEIDU (PIEMĒRAM, "PATERNITĀTE" VAI "PUSMĀSAS");
- KONTAKTINFORMĀCIJU: TELEFONA NUMURU, E-PASTU. VEIDLAPA MEKLĒJAMA MĀJAS LAPĀ WWW.GENERA.LV SADAĻĀ "NODERĪGA INFORMĀCIJA".

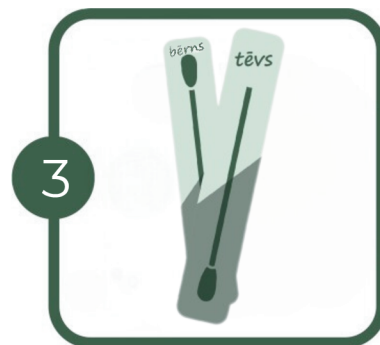


3 NOMARKĒJIET BIRSTĪŠU IEPAKOJUMU:


RAKSTIET, PIEMĒRAM, VĀRDU VAI SEGVĀRDU, DERĒS ARI UZRAKSTS "TĒVS" UN "BĒRNS", LAI LABORATORIJA VARĒTU IDENTIFICĒT ATŠĶIRĪGU PERSONU PARAUGUS.




4
NOMAZGĀJIET UN NOŽĀVĒJIET ROKAS VAI LIETOJIET IEPRIEKŠ NELIETOTUS VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS CIMDUS.

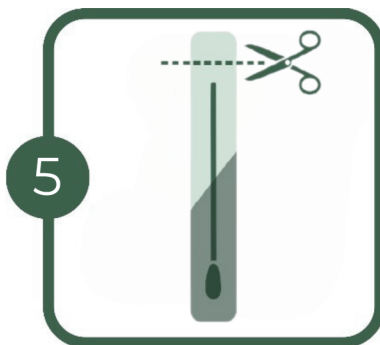


5
UZMANĪGI IZŅĒMIET BIRSTĪTI NO IEPAKOJUMA. **PIESKARTIES DRĪKST TIKAI TAM KOCIŅĀ GALAM, UZ KURA NAV BIRSTĪTE.**

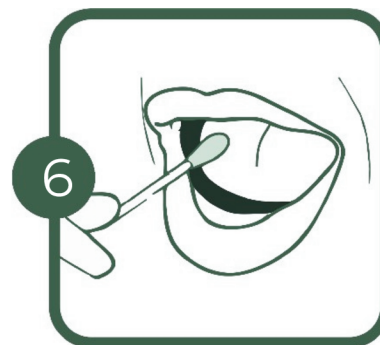


6
INTENSĪVI PABERZĒJIET UN ROTĒJIET BIRSTĪTI PA VAIGA IEKŠPUSI APMĒRAM 15 SEKUNDES.

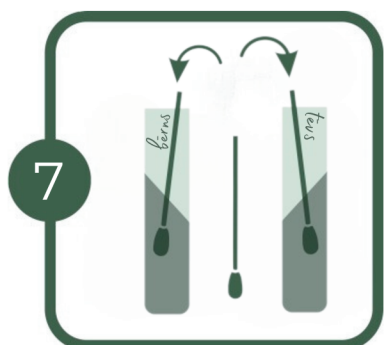

7
NEKAVĒJOTIES LIECIET BIRSTĪTI ATPAKAĻ TĀS ORIGINĀLAJĀ IEPAKOJUMĀ **AR GALU, UZ KURA IR PARAUGS (BIRSTĪTE), VĒRSTU UZ LEJU - IEPAKOJUMA APAKŠDAĻĀ.**

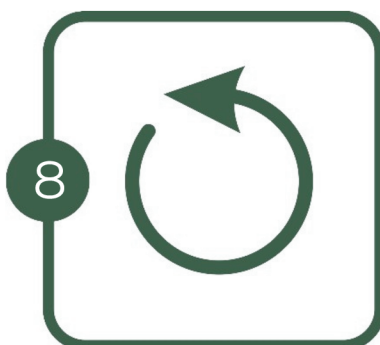

8
ATKĀRTOJIET SOĻUS 5 LĪDZ 7 AR OTRU BIRSTĪTI UN PĀRĒJĀM TESTĀ IESAISTĪTĀJĀM PERSONĀM. PARAUGU UZGLABĀŠANAI NAV NEPIECIEŠAMI ĪPAŠI APSTĀKĻI, KAMĒR TIE IR AIZSARGĀTI NO TIEŠIEM SAULES STARIEM. ILGSTOŠAI UZGLABĀŠANAI (ILGĀK KĀ 2 DIENAS) IESAKĀM PARAUGUS IEVIETOT SALDĒTAVĀ.

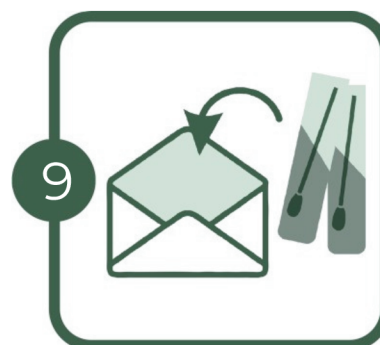

9
IEVIETOJIET MARKĒTOS PARAUGUS UN AIZPILDĪTO TESTĒŠANAS PIERSĀJUMA FORMU TĪRĀ ATPAKALSŪTĪŠANAS APLOKSNĒ. AIZLĪMĒJIET APLOKSNĪ.
PARAUGU SŪTĪŠANAI NAV NEPIECIEŠAMI ĪPAŠI APSTĀKĻI, JA VIEN TIE IR AIZSARGĀTI NO TIEŠIEM SAULES STARIEM.

NOGĀDĀJIET PARAUGUS LABORATORIJĀ/SŪTIET PA PASTU. JA JŪS LIETOJAT MŪSU NEKLĀTIENES PARAUGU NOŅEMŠANAS KOMPLEKTĀ ESOŠO ATPAKAĻ SŪTĪŠANAS APLOKSNĪ, TAD JUMS NAV JĀLIETO PASTA MARKA SŪTĪŠANAI LATVIJAS TERITORIJĀ.
VAIRĀK INFORMĀCIJAS: +371 26267833, INFO@GENERA.LV, WWW.GENERA.LV

GenEra




INSTRUCTION

FOR THE SAMPLING PRIMARY SAMPLES (ORAL MUCOSA BUCCAL SWABS)

ATTENTION!!!

- READ THESE INSTRUCTIONS TO THE END BEFORE TAKING SAMPLES.
- DO NOT COLLECT SAMPLES IMMEDIATELY AFTER BRUSHING TEETH, EATING (ESPECIALLY FOR INFANTS) OR SMOKING (WAIT AT LEAST ONE HOUR).

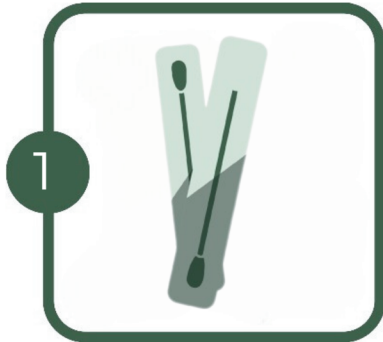


1
FOR EACH PERSON INVOLVED IN THE TEST YOU NEED TWO BRUSHES AND THEIR ORIGINAL INDIVIDUAL PACKAGING.




MANDATORY FILL IN THE TESTING REQUEST AND INDICATE:


- NAME OR NICKNAME FOR ALL PERSONS INVOLVED IN TESTING;
- THE TYPE OF RELATEDNESS YOU WANT TO TEST (FOR EXAMPLE "PATERNITY" OR "HALF-SISTERS");
- CONTACT INFORMATION: YOUR PHONE NUMBER, E-MAIL.
THE FORM CAN BE FOUND ON THE WEBSITE WWW.GENERA.LV ON SECTION "USEFUL INFORMATION".

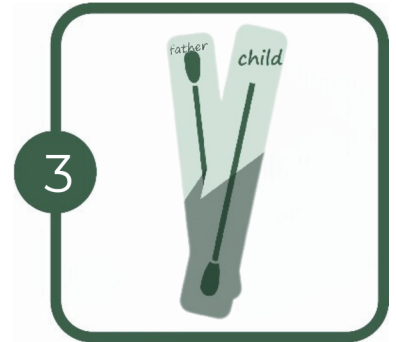


3
LABEL THE PACKAGE OF THE BRUSHES:
WRITE, FOR EXAMPLE, YOUR NAME OR NICKNAME, TERMS "FATHER" AND "CHILD" ALSO SUITS, SO THE LABORATORY CAN IDENTIFY SAMPLES OF DIFFERENT PERSONS.

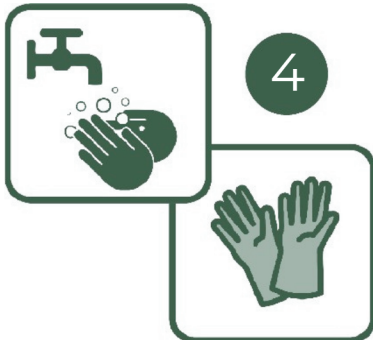


4
WASH AND DRY HANDS THOROUGHLY OR USE UNUSED DISPOSABLE GLOVES.

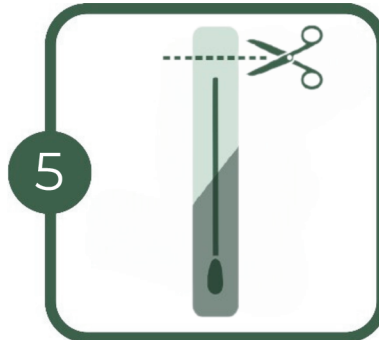


5
CAREFULLY OPEN AND TAKE OUT THE BRUSH FROM ITS PACKAGING.
PLEASE TOUCH ONLY THE STICK END AND DO NOT TOUCH THE BRUSH.

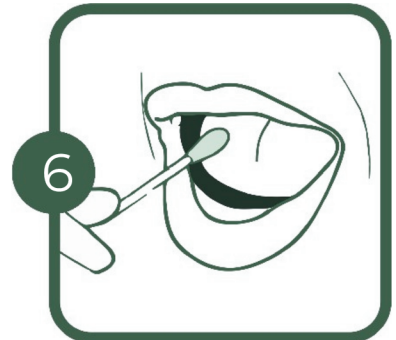


6
SCRAPE AND ROTATE THE BRUSH VIGOROUSLY ON THE INSIDE OF THE CHEEK FOR APPROX. **15 SECONDS.**

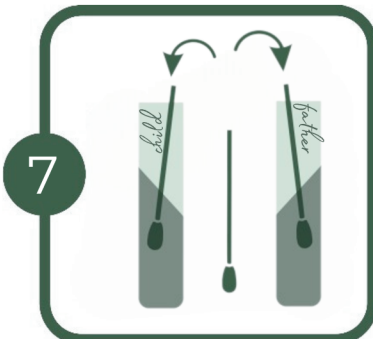

7
IMMEDIATELY PLACE THE BRUSH INTO IN ITS ORIGINAL PACKAGING
WITH THE END CONTAINING THE SAMPLE (BRUSH) POSITIONED AT THE BOTTOM OF THE PACKAGE.

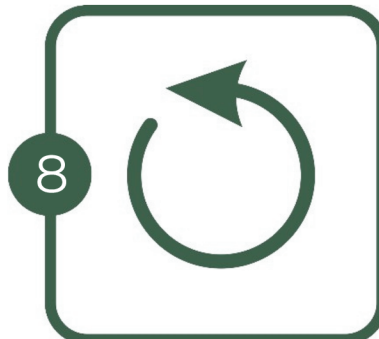

8
REPEAT STEPS 5 TO 7 WITH THE SECOND BRUSH AND FOR OTHER PERSONS INVOLVED IN THE TEST.
NO SPECIAL CONDITIONS ARE REQUIRED FOR THE STORAGE OF THE SAMPLES WHILE THEY ARE PROTECTED FROM DIRECT SUN. FOR LONG-TERM STORAGE (LONGER THAN 2 DAYS), WE RECOMMEND PLACING THE SAMPLES IN THE FREEZER.

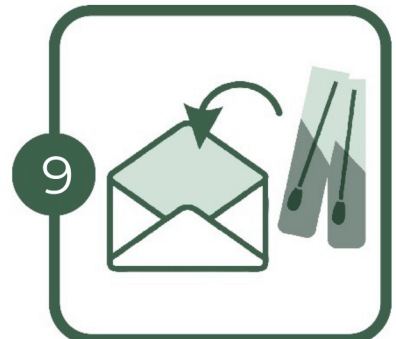

9
PLACE LABELED SAMPLES AND COMPLETED TEST REQUEST FORM IN THE CLEAN RETURN ENVELOPE. SEAL THE ENVELOPE.

NO SPECIFIC CIRCUMSTANCES ARE REQUIRED FOR SAMPLE MAILING IF THEY STAY PROTECTED FROM DIRECT SUN.

DELIVER SAMPLES TO THE LABORATORY / SEND BY MAIL. IF YOU USE THE ENVELOPE INCLUDED IN OUR EXTRAMURAL SAMPLE COLLECTION KIT, YOU DO NOT NEED POST STAMP FOR MAILING WITHIN LATVIA TERRITORY.

MORE INFORMATION: +371 26267833, E-MAIL: INFO@GENERA.LV, WWW.GENERA.LV

GenEra


ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПЕРВИЧНОГО ОБРАЗЦА (МАЗОК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА)



ВАЖНО!!!

- ПЕРЕД СБОРОМ ОБРАЗЦОВ ВНИМАТЕЛЬНО И ДО КОНЦА ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.
- НЕ БЕРИТЕ ОБРАЗЦЫ СРАЗУ ПОСЛЕ ЧИСТКИ ЗУБОВ, ПОСЛЕ ЕДЫ (ОСОБЕННО У МЛАДЕНЦЕВ) ИЛИ КУРЕНИЯ (ПОДОЖДИТЕ МИНИМУМ ОДИН ЧАС).

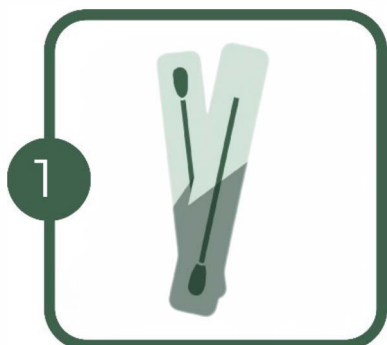


1
ДЛЯ КАЖДОЙ ВОВЛЕЧЕННОЙ В ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРСОНЫ НЕОБХОДИМО ДВЕ ЩЕТОЧКИ И ИХ ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА.



2

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ЗАПРОСА НА ТЕСТ И УКАЖИТЕ:


- ИМЯ ИЛИ ПСЕВДОНИМ ДЛЯ ВСЕХ ПЕРСОН, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТЕ
- ТИП РОДСТВА, КОТОРЫЙ ЖЕЛАЕТЕ ПРОВЕРИТЬ (НАПРИМЕР, «ОТЦОВСТВО» ИЛИ «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»);
- КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ: НОМЕР ТЕЛЕФОНА, ЭЛ. ПОЧТУ. **БЛАНК МОЖНО НАЙТИ НА ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЕ WWW.GENERA.LV В РАЗДЕЛЕ «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ».**

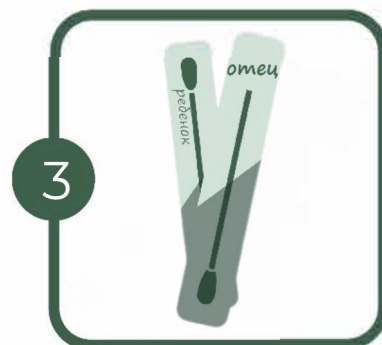


3

МАРКИРУЙТЕ УПАКОВКУ ЩЕТОЧКИ:


НАПИШИТЕ, НАПРИМЕР, ИМЯ ИЛИ ВЫДУМАННОЕ ИМЯ, ПОДОЙДЕТ ТАКЖЕ НАДПИСЬ "ОТЕЦ" ИЛИ "РЕБЕНОК". ЭТО НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ В ЛАБОРАТОРИИ МОГЛИ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ОБРАЗЦЫ РАЗНЫХ ПЕРСОН (ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ НАШИ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦОВ, ТО УПАКОВКИ СО ЩЕТОЧКАМИ УЖЕ МОГУТ БЫТЬ МАРКИРОВАНЫ/ПОДПИСАНЫ).

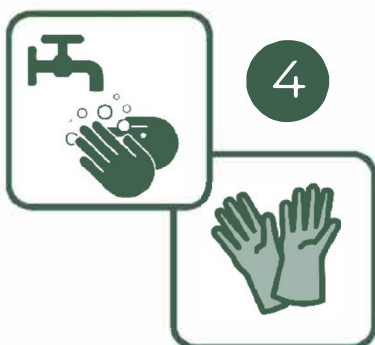


4
ВЫМОЙТЕ, ВЫСУШИТЕ РУКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ.

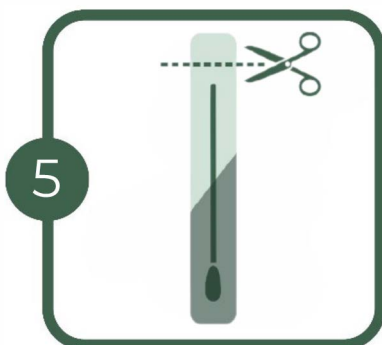


5
ВНИМАТЕЛЬНО ВЫБЕРИТЕ ЩЕТОЧКУ ИЗ УПАКОВКИ. **ПРИКАСАТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО К КОНЦУ ПАЛОЧКИ, НА КОТОРОМ НЕТ ЩЕТОЧКИ.**

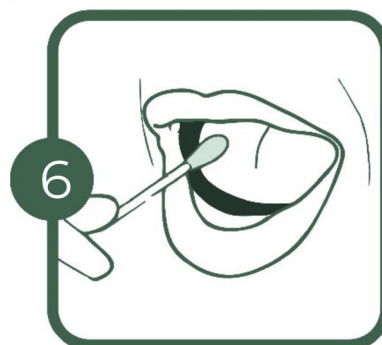


6
ИНТЕНСИВНО ПОТРИТЕ И ПОВРАЩАЙТЕ ЩЕТОЧКУ ПО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ЩЕКИ, ПРОКРУЧИВАЯ ПАЛОЧКОЙ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 15 СЕКУНД.

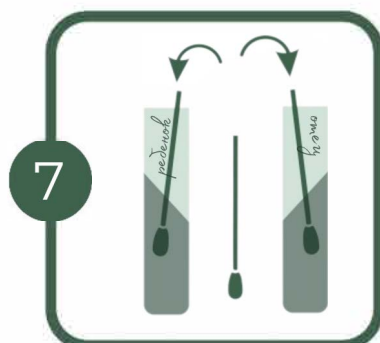

7
НЕМЕДЛЕННО ПОМЕСТИТЕ ЩЕТОЧКУ В ОРИГИНАЛЬНУЮ УПАКОВКУ **КОНЦОМ, НА КОТОРОМ ОБРАЗЕЦ (ЩЕТКА), НАПРАВЛЕННЫМ ВНИЗ - НА ДНО УПАКОВКИ.**

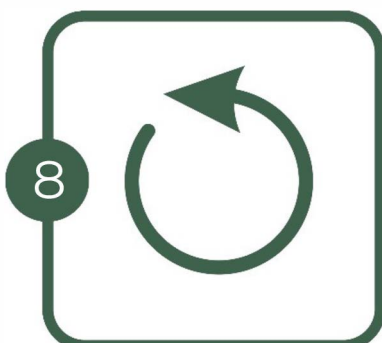

8
ПОВТОРИТЕ ШАГИ 5-7 С ВТОРОЙ ЩЕТОЧКОЙ И ЩЕТОЧКАМИ ДЛЯ ДРУГИХ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТЕ. ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОБРАЗЦЫ НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ДЛЯ ИХ ХРАНЕНИЯ НЕ НУЖНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. ДЛЯ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ (ДОЛЬШЕ, ЧЕМ 2 ДНЯ) СОВЕДУЕМ ХРАНИТЬ ОБРАЗЦЫ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНИКЕ.

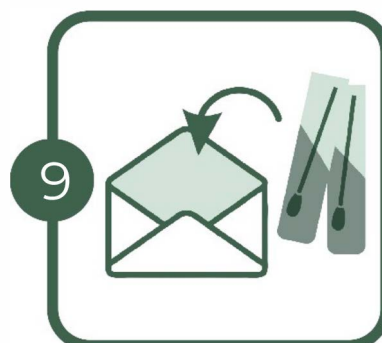

9
ПОМЕСТИТЕ ПОДПИСАННЫЕ ОБРАЗЦЫ И ЗАПОЛНЕННЫЙ БЛАНК В ЧИСТЫЙ КОНВЕРТ. **ЗАКЛЕЙТЕ КОНВЕРТ.**

ДЛЯ ОТСЫЛКИ ОБРАЗЦОВ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ, КРОМЕ КАК ЗАЩИТЫ ОТ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.

ДОСТАВЬТЕ ОБРАЗЦЫ В ЛАБОРАТОРИЮ ИЛИ **ОТПРАВЬТЕ ОБРАЗЦЫ ПО ПОЧТЕ**. ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ КОНВЕРТ ОТ НАШИХ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦОВ, ТО ВАМ НЕ НУЖНА МАРКА ДЛЯ ОТПРАВКИ КОНВЕРТА (КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ОТПРАВКИ ОБРАЗЦОВ ПО ТЕРРИТОРИИ ЛАТВИИ).

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ: +371 26267833, INFO@GENERA.LV, WWW.GENERA.LV