


PAMĀCĪBA

PRIMĀRO PARAUGU (UZTRIEPE NO MUTES GLĒTĀDAS) NOŅEMŠANAI

SVARĪGI!!!

- PIRMS PARAUGU NOŅEMŠANAS IZLASIET PAMĀCĪBU LĪDZ GALAM.
- NEVEICIET PARAUGA NOŅEMŠANU TŪLĪT PĒC DZĪVNIEKA KONTAKTA AR CITU DZĪVNIEKU VAI ĒŠANAS (NOGAIDIET VISMAZ VIENU STUNDU).

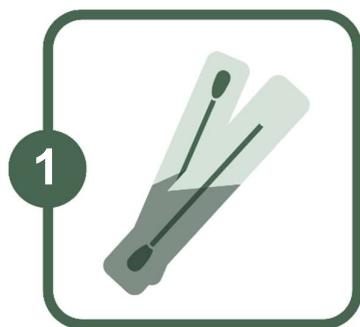


PARAUGA NOŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMI:

- DIVI VAI VĀIRĀKI VATES KOCIŅI VAI BIRSTĪTES;
- PLASTIKĀTA MAISIŅŠ (NELIETOTS), VAI ORIGINĀLAIS INDIVIDUĀLI IESAIŅOTĀ VATES KOCIŅA IEPAKOJUMS.




NOMAZGĀJIET UN NOŽĀVĒJIET ROKAS VAI LIETOJIET IEPRIEKŠ NELIETOTUS VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS CIMDUS.

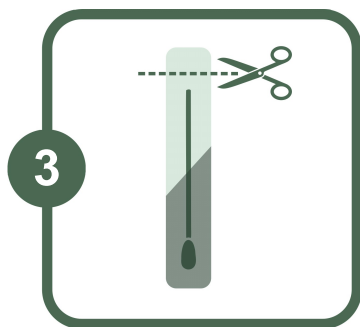


UZMANĪGI IZŅĒMIET VATES KOCIŅU NO IEPAKOJUMA. **PIESKARTIES DRĪKST TIKAI TAM KOCIŅA GALAM UZ KURA NAV VATE.**



INTENSĪVI PABERZĒJIET UN ROTĒJIET VATES KOCIŅU PA DZĪVNIEKA VAIGA IEKŠPUSI APMĒRAM 15 SEKUNDES.

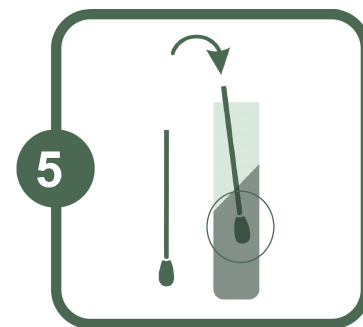

NEKAVĒJOTIES LIECIET VATES KOCIŅU MAISIŅĀ VAI ATPAKAĻ TĀ ORIGINĀLAJĀ IEPAKOJUMĀ **AR GALU, UZ KURA IR PARAUGS (VATE), VĒRSTU UZ LEJU – MAISIŅĀ/IEPAKOJUMA APAKŠDAĻĀ.**

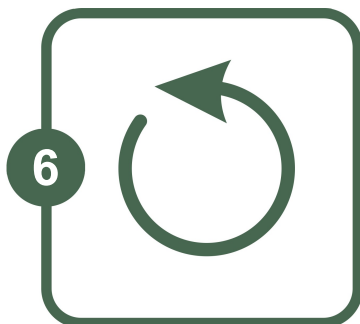


ATKĀRTOJIET SOĻUS 3 LĪDZ 5 AR PĀRĒJIEM VATES KOCIŅIEM. PARAUGU UZGLABĀŠANAI NAV NEPIECIEŠAMI ĪPAŠI APSTĀKĻI, KAMĒR TIE IR AIZSARGĀTI NO TIEŠIEM SAULES STARIEM. ILGSTOŠAI UZGLABĀŠANAI (ILGĀK KĀ 2 DIENAS) IESAKĀM PARAUGUS IEVIETOT LEDUSSKAPĪ VAI SALDĒTAVĀ.




OBLIGĀTI AIZPILDIET TESTĒŠANAS PIEPRASĪJUMA VEIDLAPU, NORĀDIET **TELEFONA NUMURU UN E-PASTA ADRESI.**

TESTĒŠANAS REZULTĀTI TIKS IZSŪTĪTI UZ NORĀDĪTO E-PASTA ADRESI, TO ATVĒRŠANAI BŪS NEPIECIEŠAMA PAROLE, KURU SAŅĒMSIET SAVĀ TELEFONĀ SMS VEIDĀ. KATRA ATSEVIŠKĀ TESTA REZULTĀTI VAR TIKT IZSŪTĪTI DAŽĀDOS LAIKOS.

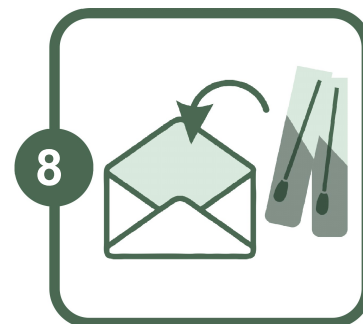

IEVIETOJIET PARAUGUS, AIZPILDĪTO TESTĒŠANAS PIERASĪJUMA VEIDLAPU UN ĀRSTA-SPECIĀLISTA NOSŪTĪJUMU, JA TĀDS IR, ATPAKAĻSŪTĪŠANAS APLOKSNĒ. AIZLĪMĒJIET APLOKSNI. PARAUGU SŪTĪŠANAI NAV NEPIECIEŠAMI ĪPAŠI APSTĀKĻI, JA VIEN TIE IR AIZSARGĀTI NO TIEŠIEM SAULES STARIEM.

NOGĀDĀJIET PARAUGUS LABORATORIJĀ/SŪTIET PA PASTU. JA JŪS LIETOJAT MŪSU NEKLĀTIENES PARAUGU NOŅEMŠANAS KOMPLEKTĀ ESOŠO ATPAKAĻ SŪTĪŠANAS APLOKSNI, TAD JUMS NAV JĀLIETO PASTA MARKA SŪTĪŠANAI LATVIJAS TERITORIJĀ.
VAIRĀK INFORMĀCIJAS: +371 26267833, INFO@GENERA.LV, WWW.GENERA.LV

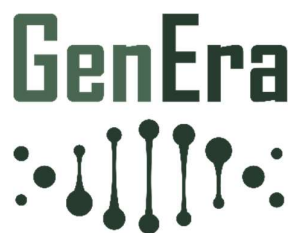


INSTRUCTION

FOR THE SAMPLING PRIMARY SAMPLES (ORAL MUCOSA BUCCAL SWABS)

ATTENTION!!!


- READ THESE INSTRUCTIONS TO THE END BEFORE TAKING SAMPLES.
- DO NOT TAKE THE SAMPLE IMMEDIATELY AFTER ANIMAL'S CONTACT WITH ANOTHER ANIMAL OR EATING (WAIT AT LEAST ONE HOUR).

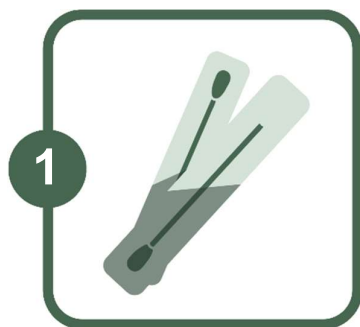

FOR SAMPLING YOU NEED:
a) TWO OR MORE COTTON SWABS OR BRUSHES;
b) PLASTIC BAG (UNUSED), OR ORIGINAL PACKAGING OF INDIVIDUALLY PACKED COTTON SWABS.




WASH AND DRY HANDS THOROUGHLY OR USE UNUSED DISPOSABLE GLOVES.

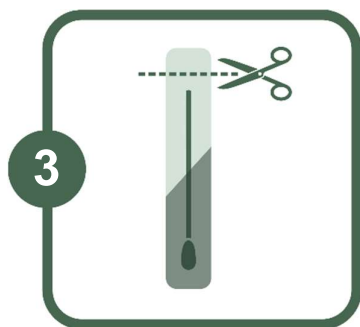


CAREFULLY REMOVE THE SWAB FROM ITS PACKAGING. **YOU CAN TOUCH ONLY THE END WITHOUT COTTON WOOL.**



SCRAPE AND ROTATE THE SWAB VIGOROUSLY ON THE INSIDE OF THE ANIMAL'S CHEEK FOR APPROX. 15 SECONDS.

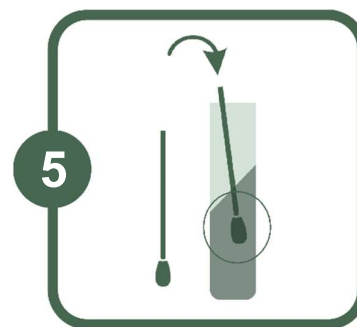


IMMEDIATELY PLACE THE SWAB INTO PLASTIC BAG OR IN ITS ORIGINAL PACKAGE **WITH THE END CONTAINING THE SAMPLE (COTTON WOOL) POSITIONED AT THE BOTTOM OF THE PACKAGE/BAG.**

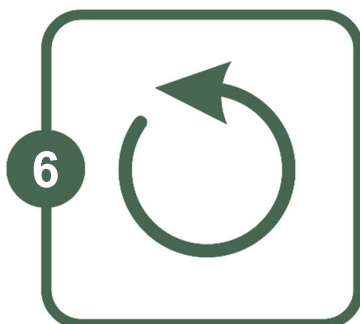

REPEAT STEPS 3 TO 5 WITH THE REST OF COTTON SWABS. NO SPECIAL CONDITIONS ARE REQUIRED FOR THE STORAGE OF THE SAMPLES WHILE THEY ARE PROTECTED FROM DIRECT SUN. FOR LONG-TERM STORAGE (LONGER THAN 2 DAYS), WE RECOMMEND PLACING THE SAMPLES IN THE FRIDGE OR FREEZER.




MANDATORY FILL IN THE TESTING REQUEST, INDICATE **YOUR PHONE NUMBER AND E-MAIL ADDRESS**. THE TESTING RESULTS WILL BE SENT TO PROVIDED E-MAIL ADDRESS, TO OPEN THE RESULTS YOU WILL NEED A PASSWORD, WHICH WILL BE SENT TO YOUR PHONE VIA SMS. THE RESULTS OF EACH INDIVIDUAL TEST MAY BE SENT AT DIFFERENT TIMES.

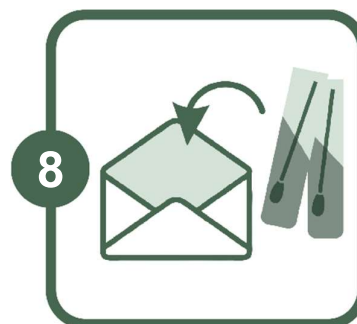

PLACE COLLECTED SAMPLES, COMPLETED TEST REQUEST FORM AND DOCTOR REFERRAL, IF ANY, IN THE RETURN ENVELOPE. SEAL THE ENVELOPE. NO SPECIFIC CIRCUMSTANCES ARE REQUIRED FOR SAMPLE MAILING IF THEY STAY PROTECTED FROM DIRECT SUN.

DELIVER SAMPLES TO THE LABORATORY / SEND BY MAIL TO LABORATORY. IF YOU USE THE ENVELOPE INCLUDED IN OUR EXTRAMURAL SAMPLE COLLECTION KIT, YOU DO NOT NEED POST STAMP FOR MAILING WITHIN LATVIA TERRITORY.

MORE INFORMATION: +371 26267833, INFO@GENERA.LV, WWW.GENERA.LV

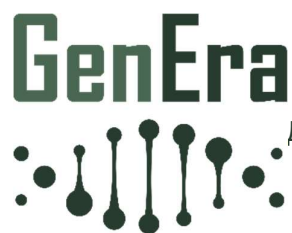


ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПЕРВИЧНОГО ОБРАЗЦА (МАЗОК СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА)

ВАЖНО!!!


- ПЕРЕД СБОРОМ ОБРАЗЦОВ ВНИМАТЕЛЬНО И ДО КОНЦА ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.
- НЕ БЕРИТЕ ОБРАЗЦЫ СРАЗУ ПОСЛЕ КОНТАКТА ЖИВОТНОГО С ДРУГИМ ЖИВОТНЫМ ИЛИ ПОСЛЕ ЕДЫ (ПОДОЖДИТЕ МИНИМУМ ОДИН ЧАС).

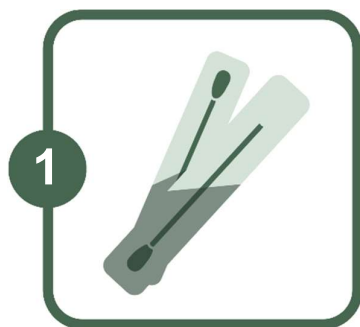

1
ДЛЯ ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦА ВАМ НЕОБХОДИМО:
А) ДВЕ ИЛИ БОЛЬШЕ ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ИЛИ ЩЁТОЧКИ;
В) ПЛАСТИКОВЫЙ ПАКЕТИК (НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ) ИЛИ ОРИГИНАЛЬНАЯ УПАКОВКА ОТ ИНДИВИДУАЛЬНО УПАКОВАННЫХ ПАЛОЧЕК.




2
ВЫМОЙТЕ, ВЫСУШИТЕ РУКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ.

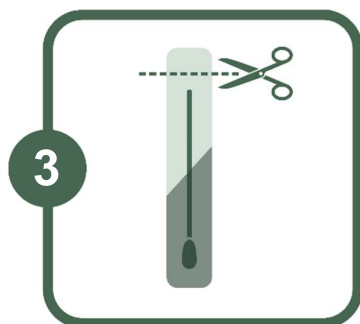


3
ОСТОРОЖНО ОТКРОЙТЕ ПАКЕТ И ДОСТАНЬТЕ ВАТНУЮ ПАЛОЧКУ ИЗ УПАКОВКИ. **ПРИКАСАТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО К КОНЦУ ПАЛОЧКИ, ГДЕ НЕТ ВАТЫ..**



4
ИНТЕНСИВНО ПОТРИТЕ ВАТНОЙ ПАЛОЧКОЙ ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ЩЕКИ ЖИВОТНОГО, ПРОКРУЧИВАЯ ПАЛОЧКОЙ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 15 СЕКУНД.

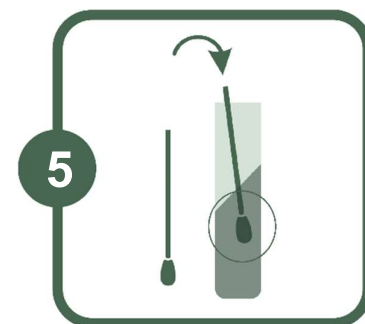


5
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОЛОЖИТЕ ВАТНУЮ ПАЛОЧКУ В МЕШОЧЕК ИЛИ В ОБРАТНО В ОРИГИНАЛЬНУЮ УПАКОВКУ **НАПРАВЛЯЯ КОНЕЦ ВАТНОЙ ПАЛОЧКИ, НА КОТОРОМ НАХОДИТСЯ ОБРАЗЕЦ (С ВАТОЙ) В НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ПАКЕТИКА**

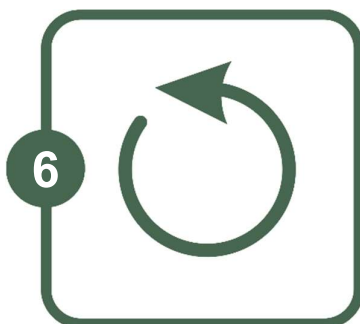

6
ПОВТОРИТЕ ШАГИ С 3 ПО 5 С ОСТАЛЬНЫМИ ВАТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ. ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОБРАЗЦЫ НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ПОПАДАНИЮ НА НИХ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ДЛЯ ИХ ХРАНЕНИЯ НЕ НУЖНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ДЛЯ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ (ДОЛЬШЕ, ЧЕМ 2 ДНЯ) СОВЕТУЕМ ХРАНИТЬ ОБРАЗЕЦ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНИКЕ.



7
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ ЗАПРОС НА ТЕСТИРОВАНИЕ, УКАЖИТЕ **НОМЕР ТЕЛЕФОНА И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ**. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ НА УКАЗАННЫЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ПАРОЛЬ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ОТПРАВЛЕН НА ВАШ ТЕЛЕФОН ЧЕРЕЗ SMS. РЕЗУЛЬТАТЫ КАЖДОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕСТА МОГУТ БЫТЬ ОТПРАВЛЕНЫ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ.

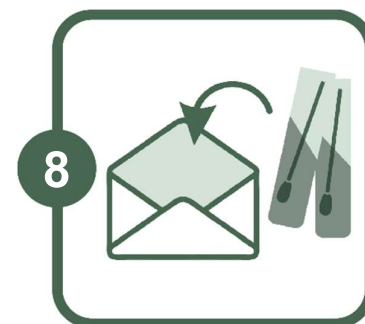

8
ПОМЕСТИТЕ ОБРАЗЦЫ, ЗАПОЛНЕННЫЙ БЛАНК И НАПРАВЛЕНИЕ ОТ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА (ЕСЛИ ТАКОВОЕ ИМЕЕТСЯ) В **ЧИСТЫЙ КОНВЕРТ**. ЗАКЛЕЙТЕ КОНВЕРТ, ДЛЯ ОТСЫЛКИ ОБРАЗЦОВ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ, КРОМЕ КАК ЗАЩИТЫ ОТ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.

ДОСТАВЬТЕ ОБРАЗЦЫ В ЛАБОРАТОРИЮ ИЛИ ОТПРАВЬТЕ ОБРАЗЦЫ ПО ПОЧТЕ. ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ КОНВЕРТ ОТ НАШИХ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦОВ, ТО ВАМ НЕ НУЖНА МАРКА ДЛЯ ОТПРАВКИ КОНВЕРТА (КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ОТПРАВКИ ОБРАЗЦОВ ПО ТЕРРИТОРИИ ЛАТВИИ).

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ: +371 26267833, INFO@GENERA.LV, WWW.GENERA.LV