


PAMĀCĪBA

PRIMĀRO PARAUGU (UZTRIEPE NO MUTES GĻOTĀDAS) NOŅEMŠANAI

SVARĪGI!!!

- PIRMS PARAUGU NOŅEMŠANAS IZLASIET PAMĀCĪBU LĪDZ GALAM.
- NEVEICIET PARAUGA NOŅEMŠANU TŪLĪT PĒC ZOBU TĪRĪŠANAS, ĒŠANAS (ĪPAŠI ZĪDAIŅIEM) VAI SMĒĶĒŠANAS (NOGAIDIET VISMAZ VIENU STUNDU).

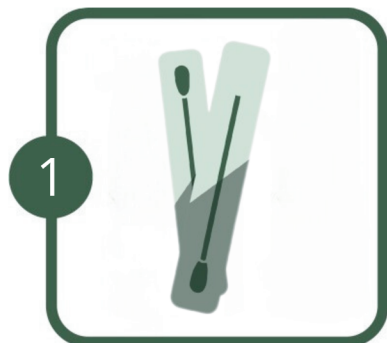


1

PARAUGA NOŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMAS DIVAS BIRSTĪTES UN TO ORIGINĀLAIS INDIVIDUĀLAIS IEPAKOJUMS.




2

NOMAZGĀJIET UN NOŽĀVĒJIET ROKAS VAI LIETOJIET IEPRIEKŠ NELIETOTUS VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS CIMDUS.

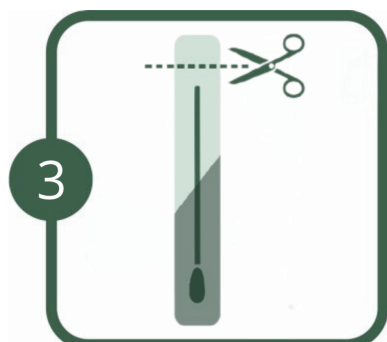


3

UZMANĪGI IZŅEMDIET BIRSTĪTI NO IEPAKOJUMA. **PIESKARTIES DRĪKST TIKAI TAM KOCIŅĀ GALAM, UZ KURA NAV BIRSTĪTE.**

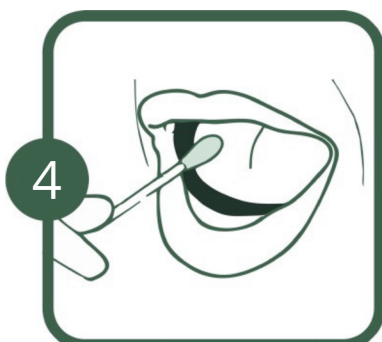


4

INTENSĪVI PABERZĒJIET UN ROTĒJIET BIRSTĪTI PA VAIGA IEKŠPUSI **APMĒRAM 15 SEKUNDES.**

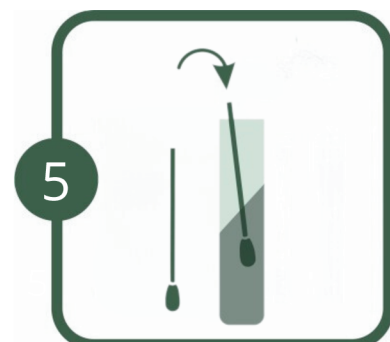

5

NEKAVĒJOTIES LIECIET BIRSTĪTI ATPAKAĻ TĀ ORIGINĀLAJĀ IEPAKOJUMĀ **AR GALU, UZ KURA IR PARAUGS (BIRSTĪTE), VĒRSTU UZ LEJU – IEPAKOJUMA APAKŠDAĻĀ.**

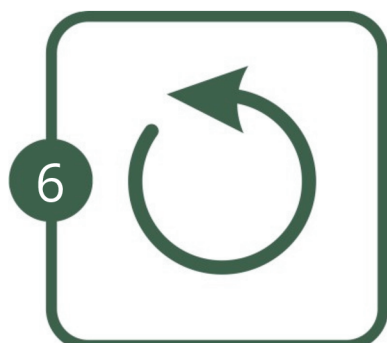


6

ATKĀRTOJIET SOĻUS 3 LĪDZ 5 AR OTRU BIRSTĪTI. PARAUGU UZGLABĀŠANAI NAV NEPIECIEŠAMI ĪPAŠI APSTĀKĻI, KAMĒR TIE IR AIZSARGĀTI NO TIEŠIEM SAULES STARIEM. ILGSTOŠAI UZGLABĀŠANAI (ILGĀK KĀ 2 DIENAS) IESAKĀM PARAUGUS IEVIETOT LEDUSSKAPĪ VAI SILDĒTAVĀ.



7

OBLIGĀTI AIZPILDIET TESTĒŠANAS PIEPRAŠĪJUMA VEIDLAPU, NORĀDIET **TELEFONA NUMURU UN E-PASTA ADRESI.** TESTĒŠANAS REZULTĀTI TIKS IZSŪTĪTI UZ NORĀDĪTO E-PASTA ADRESI, TO ATVĒRŠANAI BŪS NEPIECIEŠAMA PAROLE, KURU SAŅEMSIET SAVĀ TELEFONĀ SMS VEIDĀ. KATRA ATSEVIŠKĀ TESTA REZULTĀTI VAR TIKT IZSŪTĪTI DAŽĀDOS LAIKOS.

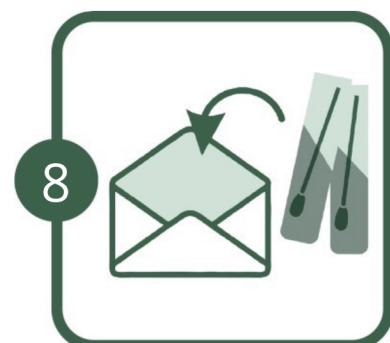


8

IEVIETOJIET PARAUGUS, AIZPILDĪTO TESTĒŠANAS PIEPRAŠĪJUMA VEIDLAPU UN ĀRSTA-SPECIĀLISTA NOSŪTĪJUMU, JA TĀDS IR, ATPAKAĻSŪTĪŠANAS APLOKSNĒ. **AIZLĪMĒJIET APLOKSNĪ.** PARAUGU SŪTĪŠANAI NAV NEPIECIEŠAMI ĪPAŠI APSTĀKĻI, JA VIEN TIE IR AIZSARGĀTI NO TIEŠIEM SAULES STARIEM.

NOGĀDĀJIET PARAUGUS LABORATORIJĀ/SŪTIET PA PASTU. JA JŪS LIETOJAT MŪSU NEKLĀTIENES PARAUGU NOŅEMŠANAS KOMPLEKTĀ ESOŠO ATPAKAĻ SŪTĪŠANAS APLOKSNĪ, TAD JUMS NAV JĀLIETO PASTA MARKA SŪTĪŠANAI LATVIJAS TERITORIJĀ.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS: +371 26267833, INFO@GENERA.LV, WWW.GENERA.LV

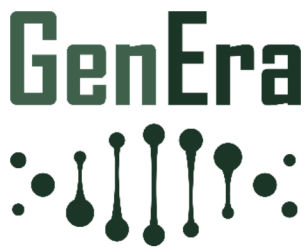


INSTRUCTION

FOR THE SAMPLING PRIMARY SAMPLES (ORAL MUCOSA BUCCAL SWABS)

ATTENTION!!!


- **READ THESE INSTRUCTIONS TO THE END BEFORE TAKING SAMPLES.**
- **DO NOT COLLECT SAMPLES IMMEDIATELY AFTER BRUSHING TEETH, EATING (ESPECIALLY FOR INFANTS) OR SMOKING (WAIT AT LEAST ONE HOUR).**

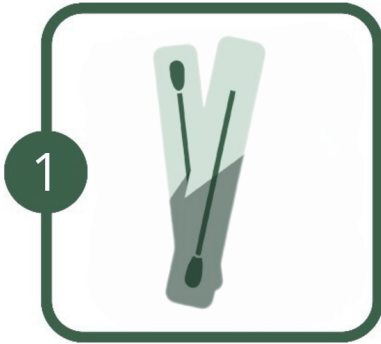


FOR SAMPLING YOU NEED TWO BRUSHES AND THEIR ORIGINAL INDIVIDUAL PACKAGING.




WASH AND DRY HANDS THOROUGHLY OR USE UNUSED DISPOSABLE GLOVES.

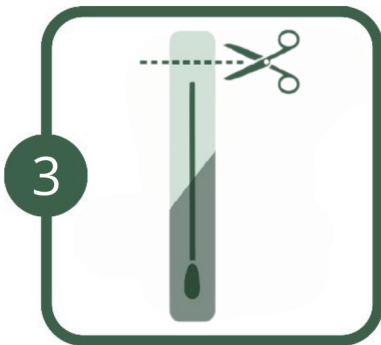


CAREFULLY OPEN AND TAKE OUT THE BRUSH FROM ITS PACKAGING. **PLEASE TOUCH ONLY THE STICK END AND DO NOT TOUCH THE BRUSH.**

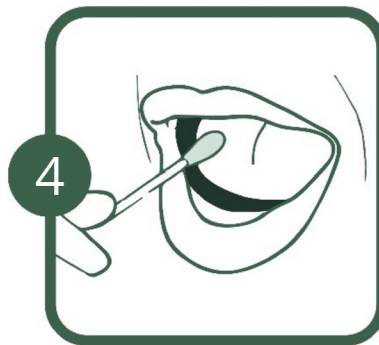

SCRAPE AND ROTATE THE BRUSH VIGOROUSLY ON THE INSIDE OF THE CHEEK FOR APPROX. **15 SECONDS.**

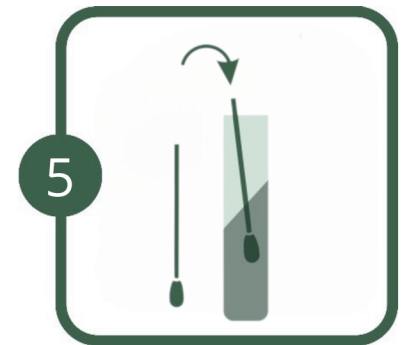

IMMEDIATELY PLACE THE BRUSH INTO IN ITS ORIGINAL PACKAGING **WITH THE END CONTAINING THE SAMPLE (BRUSH) POSITIONED AT THE BOTTOM OF THE PACKAGE.**

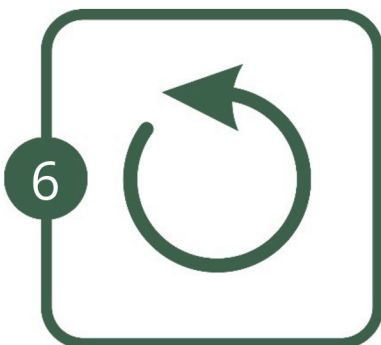


REPEAT STEPS 3 TO 5 WITH OTHER BRUSH. NO SPECIAL CONDITIONS ARE REQUIRED FOR THE STORAGE OF THE SAMPLES WHILE THEY ARE PROTECTED FROM DIRECT SUN. FOR LONG-TERM STORAGE (LONGER THAN 2 DAYS), WE RECOMMEND PLACING THE SAMPLES IN THE FRIDGE OR FREEZER.



MANDATORY FILL IN THE TESTING REQUEST, INDICATE **YOUR PHONE NUMBER AND E-MAIL ADDRESS.**

THE TESTING RESULTS WILL BE SENT TO PROVIDED E-MAIL ADDRESS, TO OPEN THE RESULTS YOU WILL NEED A PASSWORD, WHICH WILL BE SENT TO YOUR PHONE VIA SMS. THE RESULTS OF EACH INDIVIDUAL TEST MAY BE SENT AT DIFFERENT TIMES.

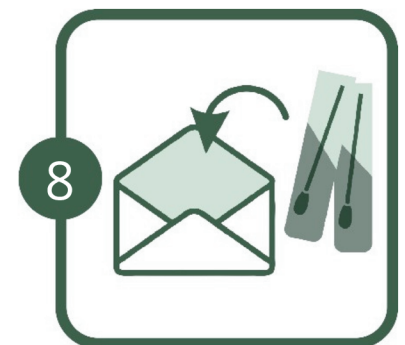

PLACE COLLECTED SAMPLES, COMPLETED TEST REQUEST FORM AND DOCTOR REFERRAL, IF ANY, IN THE RETURN ENVELOPE AND SEAL IT.

NO SPECIFIC CIRCUMSTANCES ARE REQUIRED FOR SAMPLE MAILING IF THEY STAY PROTECTED FROM DIRECT SUN.

DELIVER SAMPLES TO THE LABORATORY / SEND BY MAIL. IF YOU USE THE ENVELOPE INCLUDED IN OUR REMOTE SAMPLE COLLECTION KIT, YOU DO NOT NEED POST STAMP FOR MAILING WITHIN LATVIA TERRITORY.

MORE INFORMATION: +371 26267833, INFO@GENERA.LV, WWW.GENERA.LV

GenEra




ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПЕРВИЧНОГО ОБРАЗЦА (МАЗОК СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА)

ВАЖНО!!!


- ПЕРЕД СБОРОМ ОБРАЗЦОВ ВНИМАТЕЛЬНО И ДО КОНЦА ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.
- НЕ БЕРИТЕ ОБРАЗЦЫ СРАЗУ ПОСЛЕ ЧИСТКИ ЗУБОВ, ПОСЛЕ ЕДЫ (ОСОБЕННО У МЛАДЕНЦЕВ) ИЛИ КУРЕНИЯ (ПОДОЖДИТЕ МИНИМУМ ОДИН ЧАС).

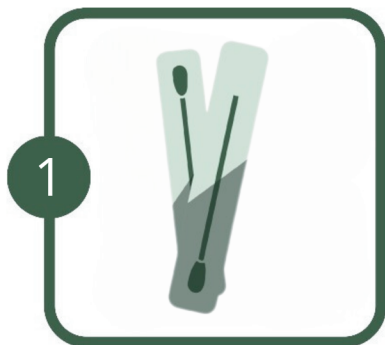


1
ДЛЯ СБОРА ОБРАЗЦОВ НЕОБХОДИМЫ ДВЕ ЩЕТОЧКИ И ИХ ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА.




2
ВЫМОЙТЕ, ВЫСУШИТЕ РУКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ.

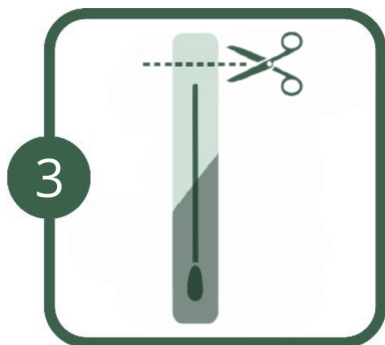


3
ВНИМАТЕЛЬНО ВЫБЕРИТЕ ЩЕТОЧКУ ИЗ УПАКОВКИ. **ПРИКАСАТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО К КОНЦУ ПАЛОЧКИ, НА КОТОРОМ НЕТ ЩЕТОЧКИ.**

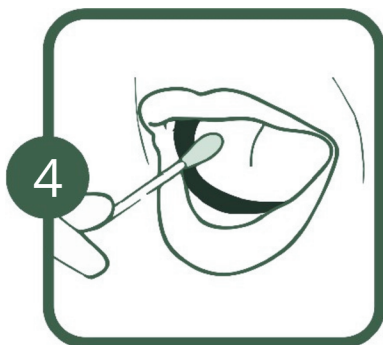

4
ИНТЕНСИВНО ПОТРИТЕ И ПОВРАЩАЙТЕ ЩЕТОЧКУ ПО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ЩЕКИ, ПРОКРУЧИВАЯ ПАЛОЧКОЙ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 15 СЕКУНД.

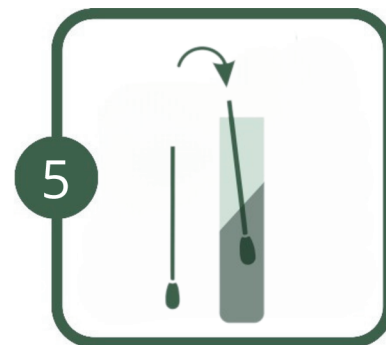


5
НЕМЕДЛЕННО ПОМЕСТИТЕ ЩЕТОЧКУ В ОРИГИНАЛЬНУЮ УПАКОВКУ **КОНЦОМ, НА КОТОРОМ ОБРАЗЕЦ (ЩЕТОЧКА), НАПРАВЛЕННЫМ ВНИЗ - НА ДНО УПАКОВКИ.**

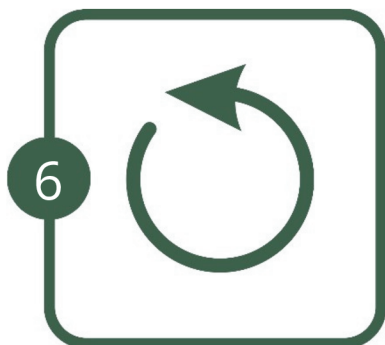

6
ПОВТОРИТЕ ШАГИ 3-5 С ВТОРОЙ ЩЕТОЧКОЙ. ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОБРАЗЦЫ НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ДЛЯ ИХ ХРАНЕНИЯ НЕ НУЖНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. ДЛЯ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ (ДОЛЬШЕ, ЧЕМ 2 ДНЯ) СОВЕТУЕМ ХРАНИТЬ ОБРАЗЕЦ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНИКЕ.



7
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ ЗАПРОС НА ТЕСТИРОВАНИЕ, УКАЖИТЕ **НОМЕР ТЕЛЕФОНА И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.** РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ НА УКАЗАННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, ДЛЯ ИХ ОТКРЫТИЯ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ПАРОЛЬ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ОТПРАВЛЕН НА ВАШ ТЕЛЕФОН В ВИДЕ SMS. РЕЗУЛЬТАТЫ КАЖДОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕСТА МОГУТ БЫТЬ ОТПРАВЛЕНЫ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ.

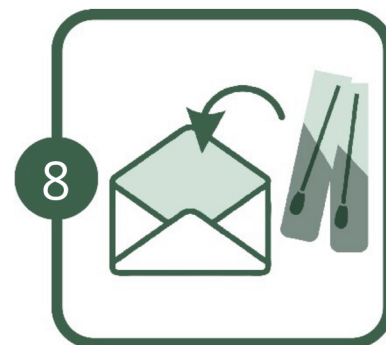

8
ПОМЕСТИТЕ ОБРАЗЦЫ, ЗАПОЛНЕННЫЙ БЛАНК И НАПРАВЛЕНИЕ ОТ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА (ЕСЛИ ТАКОВОЕ ИМЕЕТСЯ) В ЧИСТЫЙ КОНВЕРТ. ЗАКЛЕЙТЕ КОНВЕРТ.

ДЛЯ ОТСЫЛКИ ОБРАЗЦОВ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ, КРОМЕ КАК ЗАЩИТЫ ОТ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.

ДОСТАВЬТЕ ОБРАЗЦЫ В ЛАБОРАТОРИЮ ИЛИ ОТПРАВЬТЕ ОБРАЗЦЫ ПО ПОЧТЕ. ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ КОНВЕРТ ИЗ НАШИХ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦОВ, ТО ВАМ НЕ НУЖНА МАРКА ДЛЯ ОТПРАВКИ КОНВЕРТА (КАСАЕТСЯ ОТПРАВКИ ОБРАЗЦОВ ТОЛЬКО ПО ТЕРРИТОРИИ ЛАТВИИ).

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ: +371 26267833, INFO@GENERA.LV, WWW.GENERA.LV